



**SHORT
CHANNEL™**

PRESSO MASSAGGIO: tanti benefici con poca fatica

3in1

PRESSOMASSAGGIO

Tutto il corpo viene trattato attraverso un sistema di gonfiaggio sequenziale gestito da un microprocessore. I programmi in dotazione sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di bellezza e dimagrimento.

INFRAROSSO

Riscaldamento generalizzato con conseguente aumento della temperatura corporea e quindi rilassamento muscolare, eliminazione delle tossine ed aumento del microcircolo grazie alla gestione della temperatura su diversi livelli di intensità è possibile scegliere la funzionalità del trattamento: sudorazione, aumento del metabolismo, riattivazione del microcircolo ed effetto rilassante.

ELETTROSTIMOLAZIONE

Riduzione delle cellule di grasso, tonificazione e vascolarizzazione dei tessuti.

- ✓ **REGOLAZIONE TEMPO DI GONFIAGGIO E DELLA TEMPERATURA PER OGNI CANALE DA 1" a 15"**
- ✓ **POSSIBILITÀ DI ESCLUSIONE DEL GONFIAGGIO E DELL'INFRAROSSO PER OGNI SINGOLO CANALE**
- ✓ **3 LIVELLI DIFFERENTI DI REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ: MINIMO, MEDIO, MASSIMO**
- ✓ **10 USCITE A REGOLAZIONE INDIPENDENTE**
- ✓ **10 COPPIE DI ELETTRODI PER TONIFICARE E VASCOLARIZZARE I TESSUTI**


I Nostri Numeri



Tecnologie



7 elementi
kit gonfiabile
+ kit infrarossi

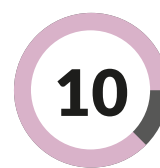

10 uscite
a regolazione
indipendente

Interfaccia Display
Alimentazione elettrica

Display touch screen a colori
230 Vac +/- 10% - 50/60 Hz

Potenza massima
assorbita

50 W

Classificazione Normativa
Potenza

CEI EN 60335-1/ CEI EN 60335-2-32
0,4 Kg/cm²

Tipologia di trattamento

Presso massaggio ad uso estetico

Dimensioni esterne

45 x 48 x 21,5 cm

Peso

10 kg

Incluso

Marsupio porta gambali

PRESSO MASSAGGIO **3in1** dimagrire con nuove soluzioni

L'apparecchiatura 3 in 1 è la combinazione di tre diverse metodiche che si legano tra loro per ottenere risultati nettamente superiori ai singoli trattamenti.

Pressomassaggio (Pressoterapia), infrarossi e elettrostimolazione sono trattamenti ormai utilizzati da anni nei centri estetici con effetti visibili e concreti.

Il centro estetico con una sola apparecchiatura potrà disporre di tre tecnologie per tre diversi tipi di trattamento, da utilizzare o singolarmente o in sinergia.

PROGRAMMA 1 Drenante Linfatico


I settori vengono gonfiati uno alla volta partendo dai piedi salendo fino alle braccia, poi tutte contemporaneamente.

PROGRAMMA 2 Drenante Venoso

Vengono gonfiati 2 settori contemporaneamente partendo dalle estremità (braccia e piedi) fino al centro (busto).

PROGRAMMA 3 Drenante Arterioso

Vengono gonfiati 2 settori contemporaneamente partendo dal centro (busto) fino all'estremità (braccia e piedi); poi i settori vengono gonfiati in modo incrociato.

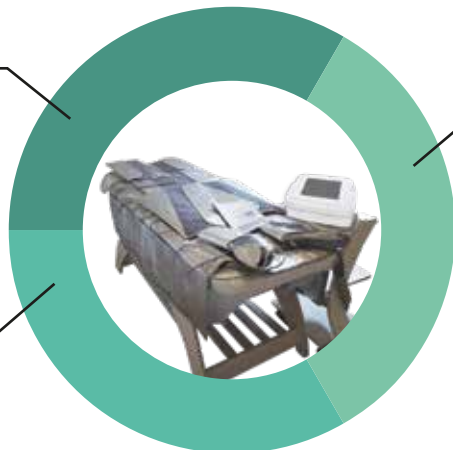

5 FUNZIONALITÀ

- Eliminazione delle tossine
- Vascolarizzazione
- Linfodrenaggio
- Rassodamento
- Tonificazione



MARSUPIO

Il Marsupio include il set di tubi di collegamento ai settori gonfiabili, rendendo comodo il lavoro dell'estetista. Terminato il trattamento è possibile riporre il kit gonfiabile nelle apposite tasche, lasciando il lettino libero.

